

重组标签蛋白快速检测试剂盒

颠覆传统, **30分钟**完成蛋白检测!

产品介绍

重组标签蛋白快速检测试剂盒是康为世纪最新研制的, 可快速检测样品中含有目前常用的融合表达蛋白标签 (GST和TRX) 的产品。

产品特点


- **快速**: 整个实验过程仅需**20-30分钟**。
- **简便**: 不需要进行SDS-PAGE和Western blot检测。
- **灵敏度高**: 最低检测限为10ng/ml。
- **特异性强**: 经过筛选的高特异性抗体可以有效地排除与其它宿主蛋白的交叉反应。

目录号	产品名称	规格	价格
CW2007	GoldCassette-GST(精装)	10次	¥ 298
CW2007A		2次	¥ 118
CW2067	GoldCassette-TRX(精装)	10次	¥ 298
CW2067A		2次	¥ 118

产品种类

- GoldCassette-GST可用于检测带有GST标签的融合蛋白的表达。
- GoldCassette-TRX可用于检测带有TRX标签的融合蛋白的表达。

菌液中蛋白的检测 (GST标签)

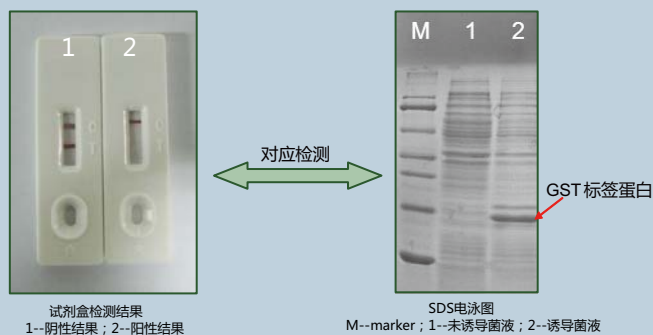

- 1—阴性结果: 没有目的蛋白时, 胶体金标记的抗体就会与试纸上的抗原相结合, 出现两条红线。
2—阳性结果: 当有目的蛋白存在时, 目的蛋白会与胶体金标记的抗体相结合, 只在质控区出现一条C线。



更多蛋白检测产品, 敬请期待.....