



**选择康为，选择领先!**

**显色**

**One Step Western 1 hour**



普通两步法 4.5 hour

封闭(60min) 一抗(60min) 清洗(45min) 二抗(60min) 清洗(45min)


## → One Step Western Kit

- ◆ 操作快捷简单：**1 h** 完成检测，无需复杂的实验流程优化。
- ◆ 试剂中已包含二抗，不需要额外添加二抗。
- ◆ 灵敏度高，抗体质量好，优于常规Western方法。
- ◆ 实验结果重复性好。

目录号	产品名称	规格	价格	促销价
CW2029	One Step Western Kit(Rabbit)	10次	<del>¥498</del>	<b>¥298</b>
CW2029B	One Step Western Kit(Rabbit)	50次	<del>¥1598</del>	<b>¥758</b>
CW2030	One Step Western Kit(Mouse)	10次	<del>¥498</del>	<b>¥298</b>
CW2030B	One Step Western Kit(Mouse)	50次	<del>¥1598</del>	<b>¥758</b>
CW2132A	One Step Western Kit AP(Rabbit)	10次	<del>¥498</del>	<b>¥298</b>
CW2132B	One Step Western Kit AP(Rabbit)	50次	<del>¥1598</del>	<b>¥758</b>
CW2133A	One Step Western Kit AP(Mouse)	10次	<del>¥498</del>	<b>¥298</b>
CW2133B	One Step Western Kit AP(Mouse)	50次	<del>¥1598</del>	<b>¥758</b>

## Examples

一步法Western 和常规两步法Western 检测结果比较图

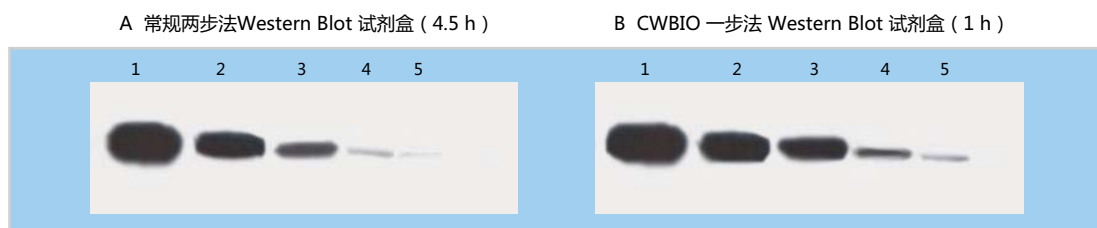

分别使用常规两步法Western Blot 试剂盒，CWBIO 一步法 Western Blot 试剂盒 (#CW2029) 检测293T细胞裂解液中的Beta-actin 蛋白。  
Lane 1, 2, 3, 4, 5的293T细胞裂解液上样量分别为40, 10, 2.5, 0.625, 0.156 ug。



## 全球首创, 颠覆传统, 30分钟完成蛋白检测!

### → 重组标签蛋白快速检测试剂盒

重组标签蛋白快速检测试剂盒—GoldCassette™-HIS, GoldCassette™-GST, GoldCassette™-TRX是康为世纪最新研制的, 可快速检测样品中是否含有目前常用的融合表达标签 ( GST、TRX和HIS ) 的蛋白产品, 是目前市面上**唯一**的重组标签蛋白快速检测试剂盒。

- ◆ 快速: 整个实验过程仅需**20-30 min**。
- ◆ 简便: 不需要进行SDS-PAGE和Western Blot检测。
- ◆ 灵敏度高: 最低检测限可达到10 ng/ml。
- ◆ 特异性强: 经过筛选的高特异性抗体可以有效地排除与其它宿主蛋白的交叉反应。

目录号	产品名称	规格	价格	促销价
CW2005	GoldCassette™-HIS	10次	¥498	¥298
CW2007	GoldCassette™-GST	10次	¥498	¥298
CW2067	GoldCassette™-TRX	10次	¥498	¥298



### 菌液中蛋白的检测 (GST标签)

试剂盒检测结果: 1--阴性结果; 2--阳性结果

SDS电泳图: M--marker; 1--未诱导菌液; 2--诱导菌液

对应检测

GST 标签蛋白

1—阴性结果: 没有目的蛋白时, 胶体金标记的抗体就会与试纸上的抗原相结合, 出现两条红线。  
2—阳性结果: 当有目的蛋白存在时, 目的蛋白会与胶体金标记的抗体相结合, 基于竞争抑制法原理, 只在质控区出现一条C线。

#### 订购方式

登陆康为世纪网站 [www.cwbiotech.com](http://www.cwbiotech.com)



点击首页订购FLASH或右上角“快速订购”



在线填写订购单并提交

#### 咨询方式

Phone: 86-10-58851919(北京) 86-21-34227503(上海) 4006-222-360(免费电话)

E-mail: [order@cwbiotech.com](mailto:order@cwbiotech.com) 或登录网站线上咨询

[www.cwbiotech.com](http://www.cwbiotech.com)